

NEUE  
PRODUKTE  
AB QUARTAL  
II-2017



**RC** PLUS  
**CORNET**®

## Tonangebend in der Atemtherapie!

Das PLUS für mehr Lebensqualität  
bei Erkrankungen speziell der  
unteren Atemwege



Löst Schleim, reduziert  
Husten und Atemnot.

## Das PLUS für mehr Lebensqualität

Die Atemtherapie, im Speziellen die Atemphysiotherapie, stellt einen wichtigen Baustein bei der Behandlung von chronischen Erkrankungen der unteren Atemwege dar. Die Befreiung von Schleim ist hierbei die zentrale Herausforderung.

### Die Abwärtsspirale bei chronischen Erkrankungen der unteren Atemwege


Bei chronischen Erkrankungen der unteren Atemwege kommt es zu vermehrtem Husten, der Bildung von Bronchialschleim und als Folge davon häufig zu Atemnot. Der Bronchialschleim bietet darüber hinaus einen Nährboden für Infekte, die häufig in Klinikaufenthalten münden. Ein Voranschreiten der Erkrankung wird begünstigt.



SYMPTOME  
VERSCHLECHTERN SICH

### Die Atemtherapie mit dem RC-Cornet® PLUS für mehr Lebensqualität

Das RC-Cornet® PLUS ist ein individuell einstellbares Hilfsmittel zum effektiven Lösen und Entfernen von festsitzendem Bronchialschleim. Dadurch reduzieren sich Atemnot und Husten. Dies sorgt für ein gesteigertes Wohlbefinden und eine verbesserte Lebensqualität.

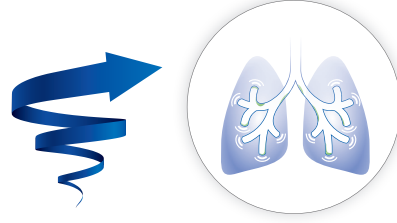

SYMPTOME  
VERBESSERN SICH

Studien<sup>1)</sup> belegen, dass die regelmäßige RC-Cornet® Therapie den Antibiotikabedarf sowie Klinikaufenthalte reduziert. Fachverbände und Leitlinien empfehlen deshalb diese Therapie bei folgenden Krankheitsbildern: COPD (Chronisch obstruktive Bronchitis), Mukoviszidose, Bronchiektasie, Lungenemphysem, Raucherhusten und Asthma.

<sup>1)</sup> Studien auf Anfrage erhältlich.

## Tonangebend in der Atemtherapie

Das innovative und patentierte RC-Cornet® PLUS lässt Patienten leichter atmen – unabhängig vom Grad der individuellen Ausatemleistung.

### Ein Hilfsmittel – viele Therapiemöglichkeiten:

- Individuell und nachhaltig auf den Patienten einstellbare Therapiemöglichkeiten.
- Ermöglicht auch Patienten mit sehr eingeschränkter Lungenfunktion die Therapien mit einem stabilisierenden und mobilisierenden, oszillierenden Ausatemdruck.
- Verbessert den Gasaustausch und reduziert Atemnot durch Weitung der Atemwege.
- Reduziert Husten durch die effektive Reinigung der Bronchien von festsitzendem Bronchialschleim.
- Atemphysio- und Inhalationstherapie können gleichzeitig durchgeführt werden (Kombi-Therapie).
- Entspricht höchsten klinischen Anforderungen an Anwendung und Hygiene. Reinigung bis zu einer Temperatur von max. 134 °C.

### Verordnung und Kostenübernahme

Das RC-Cornet® PLUS kann durch den Haus- oder Lungenfacharzt auf Rezept verordnet werden. Es ist u. a. bei COPD, Mukoviszidose und Bronchiektasie erstattungsfähig, sodass die Kosten in der Regel von den Krankenkassen übernommen werden.

Hilfsmittel-Positions-Nr. 14.24.08.0013



## Neues Design für mehr Effizienz und Komfort im Alltag

### Vernebleranschluss für die Inhalation

Inhalations- und Atemtherapie können zeitgleich durchgeführt werden. Dies reduziert die Therapiedauer und verbessert die Deposition der Medikamente.

### Auswahl der Behandlungsformen

Exakte und einfache Auswahl der zwei unterschiedlichen Behandlungsformen über das patentierte Mundstück.

### Individuell wählbare Intensität

4 Widerstände am Gehäuse regulieren die Intensität der Therapien. Dies ermöglicht die Atemtherapie auch ganz schwacher Patienten.

Artikel-Nr. 2600 | PZN 12 419 336  
Hilfsmittel-Positions-Nr. 14.24.08.0013

### Leiser während der Anwendung

Reduzierte Lautstärke durch neue Konstruktion.

### Neues Schlauchdesign

Vereinfacht die Handhabung bei Reinigung und Zusammenbau.

## RC-Cornet<sup>PLUS</sup> TRACHEO für tracheotomierte Patienten mit Kanüle

Das RC-Cornet<sup>PLUS</sup> TRACHEO ist eine Variante des RC-Cornet<sup>PLUS</sup>. Sie verfügt über einen integrierten Tracheoansatz für Patienten mit einer Kanüle (Tubus). Ermöglicht die gleichzeitige Inhalations- und Atemphysiotherapie. Erleichtert und verkürzt ggf. das Weaning.

Artikel-Nr. 2690 | PZN 12 441 324

## Eigenmanagement der Therapie

Effektives Eigenmanagement der Therapie wird unterstützt durch:

- einen individuellen Therapieplan
- ein übersichtliches Therapietagebuch
- eine kostenfreie App



VERFÜGBAR  
Q3/2017

**TAGEBUCH RC-CORNET<sup>PLUS</sup> THERAPIE**  
Führen Sie das Tagebuch regelmäßig (morgens / mittags / abends). Die Symptome dokumentieren Sie bitte immer morgens.

	1. Tag	2. Tag	3. Tag	4. Tag	5. Tag	6. Tag	7. Tag	8. Tag	9. Tag	10. Tag	11. Tag	12. Tag	13. Tag	14. Tag	15. Tag	16. Tag	17. Tag	18. Tag	19. Tag	20. Tag	21. Tag	22. Tag	23. Tag	24. Tag	
Einzelung 1 / Widerstand																									
Einzelung 2 / Widerstand																									
Kombi-Therapie																									
Einzelung 1 / Widerstand																									
Einzelung 2 / Widerstand																									
Kombi-Therapie																									
Zusätzliche Anwendungsformen																									
Datum																									
Art / Atemphysiotherapeut																									
Kontrolltermin																									

**INDIVIDUELLER THERAPIEPLAN**

THERAPIEPLAN FÜR: \_\_\_\_\_

Einzelung 1 / Widerstand: \_\_\_\_\_ Minuten: \_\_\_\_\_ tägliche Anwendung

Einzelung 2 / Widerstand: \_\_\_\_\_ Minuten: \_\_\_\_\_ tägliche Anwendung

Kombi-Therapie: \_\_\_\_\_ Minuten: \_\_\_\_\_ tägliche Anwendung

Zusätzliche Anwendungsformen: \_\_\_\_\_



Datum: \_\_\_\_\_ Art / Atemphysiotherapeut: \_\_\_\_\_ Kontrolltermin: \_\_\_\_\_

Weitere Informationen zu den Produktvarianten: [www.cegla.de](http://www.cegla.de)

## Tonangebend in der Atemtherapie!

Das RC-Cornet<sup>PLUS</sup> nutzt die gesamte Ausatemluft zur effektiven Reinigung der Atemwege. Selbst sehr schwache Patienten können die Therapien nutzen. Das Hilfsmittel bietet über die Einstellungen am Mundstück zwei Behandlungsformen an:

AUSGANGSSITUATION

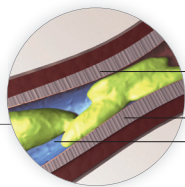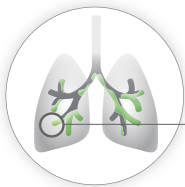

entzündete Schleimhaut  
Bronchialschleim  
verlegter Teil der Bronchien


### Ausgangssituation

Verengte und durch Schleim verlegte Bronchien.


### Weitung der Atemwege zur Reduktion von Atemnot

#### EINSTELLUNG 1: Stabilisierender Ausatemdruck

Der stabilisierende Ausatemdruck mit Vibrationen weitet die Atemwege.

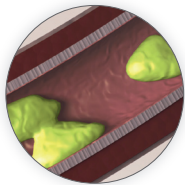


- Verlegungen werden geöffnet. Eingeschlossene Luft kann dadurch entweichen, Überblähungen werden reduziert und der Gasaustausch verbessert sich.
- Der stabilisierende Ausatemdruck öffnet kleine, verschlossene Verbindungen zwischen den Lungenbläschen (a). Minderbelüftete Bereiche werden wieder aktiviert (b). Zudem wird der Bronchialschleim durch den vibrierenden Ausatemdruck abtransportiert (Kollaterale Ventilation).

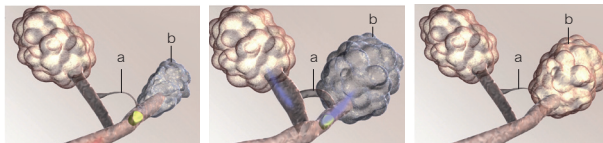

ERGEBNIS EINSTELLUNG 1: Atemnot wird reduziert

EINSTELLUNG 2

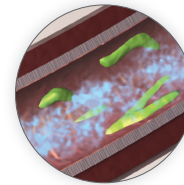



### Mobilisation von Bronchialschleim reduziert Husten

#### EINSTELLUNG 2: Mobilisierender Ausatemdruck

zur Reduktion von Husten. Der mobilisierende asynchrone Ausatemdruck mit Vibrationen löst die starken Verschleimungen von den Bronchialwänden und verflüssigt diese. Der gelöste Bronchialschleim kann dann effektiv und einfach abgehustet werden.

Ist die Reinigung vollzogen, reduziert sich automatisch der Husten. Zudem sinkt durch die Entfernung des Schleims die Anfälligkeit für Infekte.

ERGEBNIS

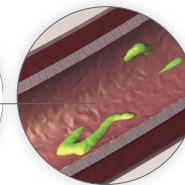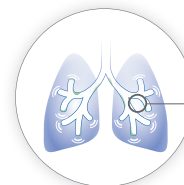

### Ergebnis der RC-Cornet<sup>PLUS</sup> Therapie

Reduktion von Atemnot und Husten durch Schleimlösung sowie Verbesserung des Gasaustausches.

Einen ausführlichen 3-D-Film sowie einen Anwenderfilm finden Sie auf [www.cegla.de](http://www.cegla.de)

# Neue Produkte für die oberen Atemwege

Die Pflege der oberen Atemwege kann einen positiven Einfluss auf die chronische Erkrankung der unteren Atemwege wie z.B. Asthma, COPD und Mukoviszidose haben. Die folgenden, neuen Produkte unterstützen Sie:



Das RC-Cornet® PLUS NASAL ist eine Variante des RC-Cornet® PLUS. Es erzeugt Druckschwankungen (Oszillationen) in den oberen Atemwegen. Diese wirken langfristig abschwellend, schleimlösend sowie regenerierend speziell bei chronischen Erkrankungen der oberen Atemwege. In Kombination mit einem Inhalationsgerät ist eine gleichzeitige Inhalations- und Atemphysiotherapie für die Nase möglich.



Artikel-Nr. 2680 | PZN 12 441 330



Das Feuchtigkeitsgel RC-Gel NASAL pflegt und befeuchtet trockene und gereizte Naseneingänge auf natürlicher Basis.



Artikel-Nr. 260 | PZN 12 510 686



Die Nasendusche RC-RHINO HORN befreit bei regelmäßiger Anwendung die Nase von Reizpartikeln und die Schleimhäute werden befeuchtet. So wird Atemwegsinfekten vorgebeugt. Mit üblichem Kochsalz und dem beiliegenden Dosierlöffel anwendbar.



Artikel-Nr. 821 | PZN 12 436 004

Copyright 2017 by R. Cegla GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten, Nachdruck und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Eigentümerin der Trade Marks und der registrierten Trade Marks ist das Unternehmen R. Cegla GmbH & Co. KG.

Produkte sind erhältlich im Online-Shop unter [www.cegla-shop.de](http://www.cegla-shop.de) sowie in Apotheken und Sanitätshäusern.

**CEGLA**  
MEDIZINTECHNIK

R. Cegla GmbH & Co. KG  
Horresser Berg 1  
D-56410 Montabaur  
Tel. +49 2602 9213-0  
[info@cegla.de](mailto:info@cegla.de)  
[www.cegla.de](http://www.cegla.de)